

Stephen H Anatomical - Mini - behandlingsstol / terapistol



Stephen H Anatomical - Mini - behandlingsstol / terapistol



Multifunktiel behandlingsstol til f.eks. dialyse og kemoterapi eller på onkologiafdelinger. Stolen er designet med børns forhold in mente, så det længerevarende ophold i stolen, bliver så behageligt som muligt for barnet.

Liggefladen er opdelt i 4 sektioner (hovedstøtte, ryglæn, sæde og ben) og har samtidig bevægelse af ryg- og bendel via 1 motor. Hovedstøtten er forbundet med ryglænet.

Armlænenes bevægelser er synkroniseret med ryglænet og kan justeres efter ønske. Armlænene er helt aftagelige og kan drejes, vippes og vendes ved 90° (andre armlæn kan tilkøbes). Brugervenlig håndbetjening med 3,5 meter spiralledning, og visuelle piktogrammer til gavn for personer med nedsat synsevne (IP66), og er forsynet med nøgle til hindring af uautoriseret brug af håndbetjening.

Stolen fås med op til 5 motorer afhængigt af den ønskede konfiguration.

Stolens tre funktionelle separate puder til ryg, sæde og ben, sikrer en perfekt ergonomi og holdning, og er med til at forebygge tryksår.

Sæde- og benpolstringen er letaftagelig, hvilket muliggør en grundig og effektiv rengøring, og reducerer risikoen for krydskontaminering.

Den er udstyret med 4 stk. Ø100 mm robuste, rustfrie, drejelige og antistatiske hjul med centralbremse, som aktiveres let vha. fodpedaler, og er med til at sikre stolens høje stabilitet.


Den pulverlakerede anti-tip ramme er fremstillet ved hjælp af forbehandling og termohærdende epoxy-maling. Malingen kan behandles efter anmodning med antibakterielle og antimikrobielle stoffer. Fås også i rustfri stål.

Både betræk og ramme fås i flere farver og kvaliteter - oplys herom v/bestilling. (Fås i et utal af farvekompositioner.)

Stephen H Anatomical - Mini - behandlingsstol / terapistol

Stort, eksklusivt og funktionelt tilbehørsprogram forefindes (se tilbehørskataloget).

Fås også med indbygget vægt.

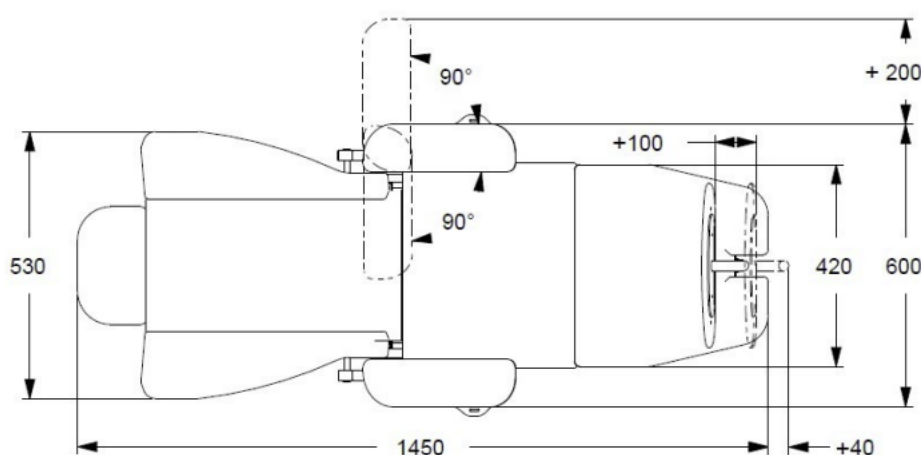


Ideel til brug i/ved:

- Kemoterapi
- Infusionsbehandling
- Daghospital
- Bloddonering/Blodprøver
- Akut afdelinger
- Dialyse
- Patienttransport
- Dermatologi / Kosmetik

Tekniske data:

Justérbar sædehøjde: nej
Laveste indstigningshøjde: 46 cm
Sædebredde: 42 cm
Ryglænsbredde: 53 cm
Total længde i oprejst-/liggeposition: 100 / 149 cm
Total bredde: 60 cm
Ryglænets vinkel: 76° (kan tilpasses efter anmodning)
Benenes vinkel: 45° (kan tilpasses efter anmodning)
Trendelenburg position: -10° (chokposition som alternativ)
Total vægt: 70 kg
Maks. brugervægt: 150 kg
Maks. belastning: 185 kg

Strømsspænding: 100 - 240 Vac 50/60 Hz
Hovedledning: Schuko eller andre efter anmodning
Elektriske motorer: Lav spænding 24 (Volt)
Maksimal elektrisk indgang/input: 4A
Isoleringsklasse: IP44

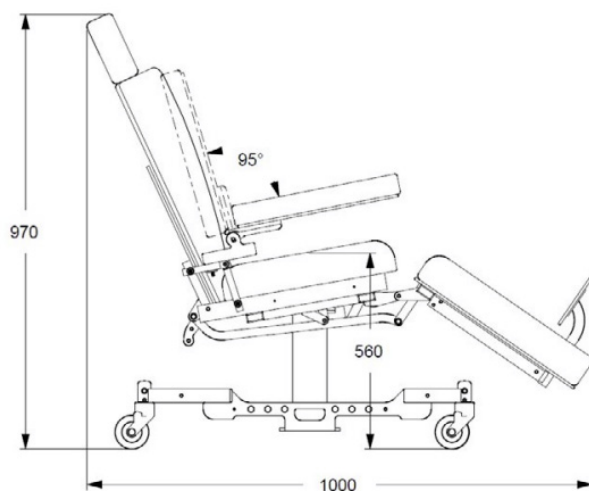

Stephen H Anatomical - Mini - behandlingsstol / terapistol

Fås med to kvaliteter af elastiske og bløde betræk, som begge er holdbare, ridsefaste, smuds-, urin- og blodafvisende, brandhæmmende og lette at rengøre.

Info om kunstlæderbetrækket:

Betrækkets sammensætning:

- Vægt ca. 620 g/m²
- PVC-belægning ca. 86 %
- Polyester-Jersey ca. 14 %
- Tykkelse 1,1 mm ±0,1
- Andel af fornybare råvarer > 10%



Info om silikonebetrækket:

Betrækkets sammensætning:

- Bredde: ±137 cm
- Vægt: ±800 gr/m¹
- Tykkelse: 1 mm



Info om rammen/stellet:

Den rustfri ramme/stel er fremstillet ved hjælp af forbehandling og termohærdende epoxymaling.

Malingen kan behandles efter anmodning med anti-bakterielle og antimikrobielle stoffer.

