

Multiline Next AC

- Stol til ambulant behandling



Multiline Next AC - Stol til ambulans behandling



Behandlingsstol med mange funktioner i én: Stolen kan fungere som modtage-, transport, undersøgelses-/behandlings- og hvilestol.

Ergonomi, funktionalitet, mobilitet og patientkomfort udgør en unik kombination af stol og leje.

Fleksibilitet, præcision, håndtering, mobilitet og sikkerhed - stolen giver effektiv anvendelse af pladsen og har en høj grad af omkostningseffektivitet.

Den er perfekt til kirurgisk forberedelse, transport af patienter til og fra operationsstuen, efter kirurgi og transport i opvågningsstuen efter anæstesi.

MULTILINE NEXT AC er ideel i små rum, hvor konventionelle senge ikke passer - et godt alternativ til behandlingslejer og evt. senge i f.eks. akutmodtagelse eller dagambulatorier.

Patienten kan modtages og placeres i stolen, og herefter transporteres siddende til undersøgelse og behandling - ved behandling kan stolen indstilles som leje, og hæves til en behandlingshøjde på helt op til 90 cm over gulvet.

Armlænene kan fungere som sengehest, når stolen er indstillet som leje.

Et dynamisk fleksibelt affjedringssystem i sædedelen, understøtter bevægelsesfriheden for rygsøjlen, bækkenet og hofterne, og lindrer således presset herpå, til stor fordel for patienten.

Stolen har Trendelenburgposition, hvis patienten skulle blive dårlig undervejs - funktionen kan hurtigt aktiveres med foden, således hænderne er fri til at assistere.

Efter behandling kan stolen bruges som hvileleje/stol, indtil patienten er klar til at tage hjem igen.

Let adgang og enkel desinfektion sikrer maksimal hygiejne.

Elektrisk justering af ryglæn, sæde og benstøtter, samt højde.

Inkl. 4 motorer, centralbremse og et stærkt batteri.

Multiline Next AC - Stol til ambulant behandling

Fås i flere farver og 2 kvaliteter, "Compact" og "Premium"

compact.



premium.



Tekniske data:

	Multiline Next AC
Længde - siddefunktion (gulvplads)	107 cm
Længde - liggefunktion	200 cm
Bredde - total	77 cm
Længde - liggeflade	200 cm
Bredde - liggeflade	60 cm
Skumtykkelse	9 cm
Længde - armlæn	73 cm
Bredde - armlæn	7 cm
Indgangshøjde	58 cm
Højdejustering	32 cm (58-90 cm)
Hjuldiameter	125 mm
Hældning - ryglæn	-5° til 78°
Hældning - sædedel	0 til 22°
Hældning - fodstøtte	0 til 90°
Spænding	100-240v/ 50-60Hz
Egenvægt	128 kg
Maks. brugervægt	220 kg



TüV-testet



Kontakt os gerne for yderligere information

Multiline Next AC - Stol til ambulans behandling

Et stort tilbehørsprogram med bla., nakkepølle, hovedstøtte, svingbart dropstativ, LED-læselampe, gynækologisk tilbehør, patientbord og meget mere, gør at stolen kan skræddersyes til Jeres behov.

Her ses et lille udpluk af tilbehørsmuligheder:



Standard beslag



Fodpedal til indstilling



Ladestation




Infusionsholder




Drop-/infusionsstativ



Skubbehåndtag

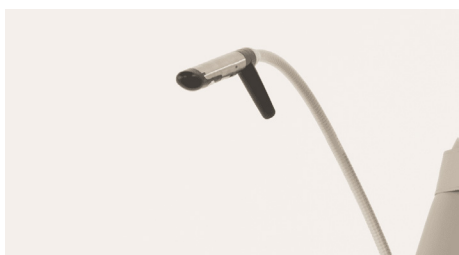

LED læselampe

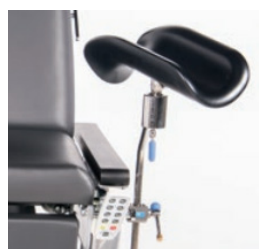

Göepelholder



Patientbord og holder




Iltflaskeholder



Centralbremse



Nakkepude/-pølle

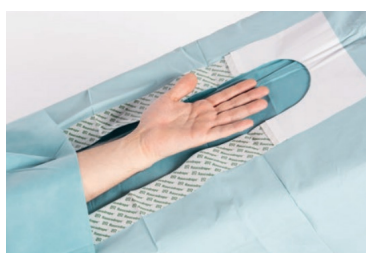

Operationsbord



Fodbetjent Trendelenburg