

Vægte og højdemål



Stolevægt - Kern "Plejhjemsvægt"

Mobil stolevægt i et ergonomisk optimeret design for sikker, praktisk vejning.

Denne stolevægt er det ideelle måleinstrument til ældreplejen og til paramedicinere, og kan håndtere overvægtige personer, der vejer helt op til 300 kg.

Kontrasterne mellem den sorte farve på sæde/ryglæn og fodstøtterne og stelletts hvide farve, gør den ideelt egnet til brug med demenspatienter.

Giver maksimal mobilitet ved at bringe vægten til brugeren. Dette sikrer en mere effektiv brug af tid for personalet og en større sikkerhed for brugeren, som kan vejes i deres eget velkendte miljø.

For de mere skrøbelige brugere giver det komfortable ergonomisk optimerede sæde sikker støtte under vejningen.

4 stk. drejelige 100 mm hjul, heraf 2 med bremse.

De store hjul gør det nemt at komme over dørtærskler, kanter og over huller ved f.eks. elevatorer.



Vægten har HOLD-funktion: Når en patient ikke står eller sidder fuldstændig stille vil en stabil vægt blive udregnet ved hjælp af en gennemsnitsvægt og denne bliver herefter frosset. Dette betyder, at der er tid til at fokusere på patienten og dernæst aflæse vægten i god ro og orden.

Vægten er forsynet med en BMI funktion, så undervægt, normalvægt eller overvægt kan fastslås.

Ergonomisk display med store taster og et LCD display med høj kontrast letter indtastning (f.eks. patientens højde til udregning af BMI) og aflæsning af patientdata.

Praktisk batteridrift ved hjælp af 6x1,5 V AA standardbatterier (inkluderet - brugstid ca. op til 40 timer) sikrer en høj grad af fleksibilitet og frihed fra hovedadaptere, stik opladere osv.

Tekniske data:

Dimensioner på vægt:
62,5 x 99 x 98,5 cm (B/D/H)

Dimensioner på vægtområde:
50 x 36 x 37 cm (B/D/H)

Nettovægt: ca. 20 kg

Nøjagtighed: 100 gram



| Varenummer | Beskrivelse | Belastning | HMI-nr. |
|--------------|----------------------------------|------------|---------|
| 44MCD300K1 | Stolevægt, Kern, u/verific. | 300 kg | 118858 |
| 44MCC-A01 | Opvaringspose til batterier o.a. | | |
| 44MBC-A06S05 | Plastovertræk t/display 5 stk. | | |

Mobil stolevægt i et ergonomisk optimeret design for sikker, praktisk vejning.

Godkendt som medicinsk udstyr i henhold til 93/42 / EØF. - (inkl. Verification class III)

Denne stolevægt er det ideelle måleinstrument til plejehjem, rehabiliteringscentre, klinikker og hospitaler, og kan håndtere overvægtige personer, der vejer op til 250 kg.

Kontrasterne mellem den sorte farve på sæde/ryglæn og fodstøtterne og stelletts hvide farve, gør den ideelt egnet til brug med demenspatienter.

Giver maksimal mobilitet ved at bringe vægten til brugeren. Dette sikrer en mere effektiv brug af tid for personalet og en større sikkerhed for brugeren, som kan vejes i deres eget velkendte miljø.

For de mere skrøbelige brugere giver det komfortable ergonomisk optimerede sæde sikker støtte under vejningen.

4 stk. 100 mm hjul, heraf 2 drejelige med bremse.

De store hjul gør det nemt at komme over dørtærskler, kanter og over huller ved f.eks. elevatorer.

Vægten har HOLD-funktion: Når en patient ikke står eller sidder fuldstændig stille vil en stabil vægt blive udregnet ved hjælp af en gennemsnitsvægt og denne bliver herefter frosset. Dette betyder, at der er tid til at fokusere på patienten og dernæst aflæse vægten i god ro og orden.



Vægten er forsynet med en BMI funktion, så undervægt, normalvægt eller overvægt kan fastslåes.

Ergonomisk display med store taster og et LCD display med høj kontrast letter indtastning (f.eks. patientens højde til udregning af BMI) og aflæsning af patientdata.

Leveres som standard med strømforsyning/adapter.

Praktisk batteridrift ved hjælp af genopladelig batteripakke (standard) eller 6x1,5 V AA standardbatterier (brugstid op til ca. 40 timer / opladning ca. 12 timer), som sikrer en høj grad af fleksibilitet og frihed fra hovedadaptere, stik opladere osv. kan tilkøbes.

Praktisk pose til opbevaring af af strømforsyning/adapter o.a. kan tilkøbes.

Tekniske data:

Dimensioner på vægt:
62,5 x 99 x 98,5 cm (B/D/H)

Dimensioner på vægtområde:
50,2 x 38 x 41 cm (B/D/H)

Nettovægt: ca. 24 kg

Nøjagtighed: 100 gram



| Varenummer | Beskrivelse | Belastning | HMI-nr. |
|---------------|----------------------------------|------------|---------|
| 44MCC250K100M | Stolevægt, Kern, m/verific.. | 250 kg | 124402 |
| 44MCC-A01 | Opvaringspose til batterier o.a. | | |
| 44MBC-A06S05 | Plastovertræk t/display 5 stk. | | |



M-250 stolevægt er en klasse III godkendt medicinsk stolevægt med løftesæde - det betyder, at der kræves mindre indsats, når en patient skal ind og ud af stolen, hvilket gør det lettere og mindre stressende for både patienten og personalet.

Forsynet med et sædebetræk for at give ekstra greb til patienter, når sædet hæves.

Den stabile, behagelige bevægelse af løftesædet er designet til at følge den naturlige bevægelse af en person, der selv rejser sig fra en stol.

Vægten har fuldt numerisk tastatur til bl.a. nem BMI-beregning, fodstøtter og armlæn, og er udstyret med fire letkørlige hjul, heraf to med bremse.

Hvorfor er det vigtigt at hæve sædet?

Stolevægte er afgørende, når en patient eller beboer skal sidde ved vejning, især for dem med begrænset mobilitet.

Men den største udfordring for personalet er at få personen ind og ud af stolen.

Afhængigt af hvor mobil patienten er, kan dette kræve en stor indsats, og i ekstreme tilfælde kan der være risiko for evt. ryg- og lændeskader.

Denne stolevægt afhjælper belastningen for alle involverede, og giver en bedre brugeroplevelse.

Hvordan virker M-250?

En lille håndholdt fjernbetjening bruges til at løfte og sænke sædet. Bevægelsen af det ergonomisk designede sæde er langsom og jævn, for at sikre den ultimative komfort for patienten.

Når sædet er i sin laveste position, med patienten siddende, vil en nøjagtig vægtaflæsning blive vist på indikatoren. Fjernbetjeningen kan derefter bruges til at hæve sædet og hjælpe patienten op i stående stilling.



Vægten har TARE funktion.

Vægten har HOLD funktion: Når en patient ikke står eller sidder fuldstændig stille vil en stabil vægt blive udregnet ved hjælp af en gennemsnitsvægt og denne bliver herefter frosset. Dette betyder, at der er tid til at fokusere på patienten og dernæst aflæse vægten i god ro og orden.

Vægten er forsynet med en BMI funktion, så undervægt, normalvægt eller overvægt kan fastslås.

Vægten kan belastes helt op til 250 kg i intervaller på 100 gram, og har et genopladeligt batteri, der giver 55 timers kontinuerligt brug fra fuld opladning.

Den har Auto power-off funktion, som hjælper med til at spare på batteriet, samt let læseligt display.

Den er Klasse III godkendt og MDD godkendt.

Det er muligt at tilvælge Bluetooth- eller Wi-Fi-forbindelse, så der kan sendes patientdata til en central database - oplys herom v/bestilling.

Printer kan tilkøbes.

Tekniske specifikationer:

Dimensioner: 106 x 66 x 101 cm (L/B/H)

Sædebredde: 54 cm

Sædedybde: 47 cm

Nettovægt: 56 kg

Nøjagtighed: 100 gram

Maks. belastning: 250 kg

| Varenummer | Beskrivelse | Belastning | HMI-nr. |
|------------|------------------------------|------------|---------|
| 43M250 | Stolevægt m/løftesæde, M-250 | 250 kg | 131164 |
| 43M-BT | Bluetooth funktion | | |
| 43M-WIFI | Wi-Fi funktion | | |

Ståvægt - Kern

Ståvægt - med eller uden indbygget højdemål.

Inkl. medicinsk verificering, klasse III.

Vægtens ergonomisk optimerede form og robuste design gør den ideel til daglig brug.

Forsynet med højdejusterbare og skridsikre gummifødder samt niveauindikator for nøjagtig justering.

Stor platform med skridsikker og slidstærk plastoverflade, som sikrer et godt fodfæste.

HOLD-funktion: Når patienten ikke står helt stille, beregnes en stabil vægt ved hjælp af en gennemsnitlig vægt, og dette bliver så "frosset".

Det betyder, at du har tilstrækkelig tid til patienten først, og derefter kan aflæse vejningen i fred.

"Mor-og-barn"-funktion: moderens vægt vil blive taget, herefter bliver skalaen nulstillet ved et tryk på en knap. Derefter kan mor og barn vejes sammen - vægten af barnet vises nu på displayet. Dette er særligt godt for spædbørn, således at de kan vugges, trygt i moderens arme, mens de vejes.

BMI-funktion: for at bestemme undervægt / normalvægt / overvægt.

Stort baggrundsbelyst LCD-display, cifferhøjde 25 mm.

Praktisk tillægsdisplay på bagsiden af hoveddisplayet, hvilket gør det nemt for både patienten og lægen eller plejepersonalet at læse vægten.

Nem at transportere takket være to integrerede transporthjul.

Data interface RS-232 standard.

Batteri- og strømdrevet.

Tekniske data:

Mål - platform: 36,5 x 36 x 8 cm (B/D/H)

Mål - uden højdemål: 36,5 x 57 x 103 cm (B/D/H)

Mål - med højdemål: 36,5 x 57 x 213,4 cm (B/D/H)

Vægt: 12 kg

Maks. brugervægt: 250 kg



| Varenummer | Beskrivelse | Belastning | HMI-nr. |
|------------|-----------------------|------------|---------|
| 705000 | Ståvægt uden højdemål | 250 kg | 117819 |
| 705001 | Ståvægt med højdemål | 250 kg | 117822 |

Ståvægt m/støttegelænder - Kern

Robust vægt med støttegelænder for ekstra sikkerhed under vejning, med CE godkendelse klasse III og med medicinsk godkendelse.

Velegnet til plejehjem, geriatrik afdeling, intern medicin samt mange flere.

Den robuste form hjælper skrøbelige og svage patienter til at stå stabilt, samtidig med at patienten vejes helt nøjagtig.

En stor plade som bund sikrer at patienten står sikkert.

Der er let adgang til vægten, da indstigningshøjden er på kun 30 mm.

Vægten er forsynet med en niveauindikator.

Vægten er hygiejnisk og let at rengøre.

Vægten har en HOLD-funktion: Når en patient ikke står eller sidder fuldstændig stille vil en stabil vægt blive udregnet ved hjælp af en gennemsnitsvægt og denne bliver herefter frosset. Dette betyder, at der er tid til at fokusere på patienten og dernæst aflæse vægten i god ro og orden.

Er forsynet med et praktisk ekstra display på bagsiden af displayet, hvilket gør det let for både patient og sundhedspersonale at aflæse vægten.



BMI-funktion: for at bestemme undervægt / normalvægt / overvægt.

Ergonomisk display med store taster og et LCD display med høj kontrast letter indtastning (f.eks. patientens højde til udregning af BMI) og aflæsning af patientdata.

Batteri-option er mulig, 6x1,5 V AA (ikke inkluderet), anvendelsestid: op til 50 timer - Kabel til netstik medfølger.

Tekniske data:

Stort LCD display med baggrundsbelysning, højde på bogstaver/tal er 25 mm.

Dimensioner på display: 20 x 12,8 x 5,5 cm (B/D/H)

Dimensioner på bundplade: 78 x 68 x 68 cm (B/D/H)

Dimensioner på den del af bundpladen der kan stå på: 60 x 60 cm (B/D)


Dimensioner på hele vægten: 78 x 68 x 110 cm (B/D/H)

Nettovægt: ca. 40 kg

Nøjagtighed: 100 gram

Verifikationsværdi: 100 gram

Maks. belastning: 300 kg (fås også med maks. belastning 400 kg - kontakt os gerne for at høre nærmere herom).

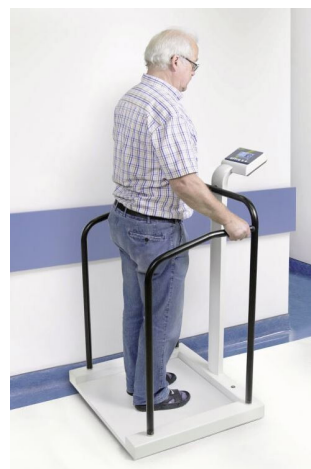

| Varenummer | Beskrivelse | Belastning | HMI-nr. |
|------------|--------------------------|------------|---------|
| 44MTA400K | Ståvægt m/støttegelænder | 300 kg | 118822 |
| 44MBC-A08 | Batterioption | | |

Kørestols-/platformsvægt - Kern

Kompakt vægt med kørestolsplatform med to integrerede adgangsramper for nem adgang.

Ideel til vejning af patienter i kørestole, fordi lavprofilplatformen kan nås fra begge sider.

Den store stålplade gør den også ideel til vejning af overvægtige patienter.

Kan med fordel også bruges til hurtig vejning af f.eks. vasketøjsvogne, containervogne, mobile bure osv.

Sikker og skridsikker positionering med højdejusterbare gummifødder.

Niveauindikator for præcis afbalancering.

Vægten har HOLD funktion: Når en patient ikke står eller sidder fuldstændig stille vil en stabil vægt blive udregnet ved hjælp af en gennemsnitsvægt og denne bliver herefter frosset. Dette betyder, at der er tid til at fokusere på patienten og dernæst aflæse vægten i god ro og orden.

Vægten er forsynet med en BMI funktion, så undervægt, normalvægt eller overvægt kan fastslås.

Ergonomisk display med store taster og et LCD display med høj kontrast letter indtastning (f.eks. patientens højde til udregning af BMI) og aflæsning af patientdata.



Vægbeslag til displayenhed medfølger.

Kan transporteres ved hjælp af de to håndtag og to hjul, og kræver ikke meget lagerplads.

Praktisk batteridrift ved hjælp af 6x1,5 V AA standardbatterier (inkluderet - brugstid ca. op til 40 timer) sikrer en høj grad af fleksibilitet og frihed fra hovedadaptere, stik opladere osv.

DAkkS certificering kan tilkøbes.

Tekniske data:

Stort LCD display med baggrundsllys, højde på bogstaver/tal er 25 mm.

Dimensioner på display: 20 x 13 x 6 cm (B/D/H)

Længde på ledning til display: 3 meter

Dimensioner på vægt: 106,6 x 100 x 8 cm (B/D/H)

Dimensioner på vægtområde: 80 x 80 cm (B/D)

Nettovægt: ca. 59 kg

Nøjagtighed: 100 gram

Maks. belastning: 300 kg

Produktet lagerføres ikke - hjemtages kun på bestilling.



| Varenummer | Beskrivelse | Belastning | HMI-nr. |
|-------------|--------------------------------|------------|---------|
| 44MWB300K-1 | Kørestols-/platformsvægt, Kern | 300 kg | 124400 |

Kørestols-/platformsvægt - m/støttegelænder - M-653

Vægten har en stor platform, der er velegnet til de fleste kørestole, og er den ideelle vægt til vejning af kørestolspatienter i f.eks. hospitals- og plejehjemsmiljøer.

Den kan også med fordel anvendes som ståvægt.

Det nedfældelige gelænder, samt de små transporthjul, betyder, at denne vægt let kan flyttes mellem f.eks. hospitalsafdelinger og værelser på et plejehjem - og samtidig med det, gør det den lettere at opbevare.

Denne vægt er især ideel til nyreafdelinger, ambulante områder, og hvor der kræves regelmæssige vejninger

Overfladen på platformen er robust og langtidsholdbar - M-653 er bygget til at modstå mange års regelmæssig brug.

Udstyret med en TARE/Preset TARE funktion, så kørestolens vægt kan fratrækkes inden vejning.

Vægten har HOLD-funktion: Når en patient ikke står eller sidder fuldstændig stille, vil en stabil vægt blive udregnet ved hjælp af en gennemsnitsvægt og denne bliver herefter frosset.

Dette betyder, at der er tid til at fokusere på patienten og dernæst aflæse vægten i god ro og orden.

Er derudover forsynet med en BMI funktion, så undervægt, normalvægt eller overvægt kan fastslås.

Den kan belastes helt op til 300 kg i intervaller på 100 g og har et genopladeligt batteri, der giver 55 timers kontinuerligt brug fra fuld opladning.

Den har Auto power-off funktion, som hjælper med til at spare på batteriet, samt let læseligt display.

Den er Klasse III godkendt og MDD godkendt.

Det er muligt at tilvælge Bluetooth- eller Wi-Fi forbindelse, så der kan sendes patientdata til en central database - oplys herom v/bestilling.

Tekniske specifikationer:

Mål, platform: 115 x 80 x 6,6 cm (L/B/H)

Mål, vejeområde: 91 x 74 cm (L/B)

Gelænderhøjde: 103 cm

Nettovægt: 28,6 kg

Nøjagtighed: 100 gram

Maks. belastning: 300 kg



| Varenummer | Beskrivelse | Belastning | HMI-nr. |
|------------|---|------------|---------|
| 43M653 | Kørestols-/platformsvægt, M-653, m/gelænder | 300 kg | 131169 |
| 43M-BT | Bluetooth funktion | | |
| 43M-WIFI | Wi-Fi funktion | | |

Kørestols-/platformsvægt - m/støttegelænder - Kern

Kompakt vægt med kørestolsplatform med to integrerede adgangsramper for nem adgang.

Ideel til vejning af patienter i kørestole, fordi lavprofilplatformen kan nås fra begge sider.

Den store stålplade gør den også ideel til vejning af overvægtige patienter.

Kan med fordel også bruges til hurtig vejning af f.eks. vasketøjsvogne, containervogne, mobile bure osv.

Sikker og skridsikker positionering med højdejusterbare gummifødder.

Niveauindikator for præcis afbalancering.

Inkl. praktisk nedfældig støttegelænger for ekstra sikkerhed.

Godkendt som medicinsk udstyr i henhold til 93/42 / EØF. - (inkl. Verification class III)

DAkKS certificering kan tilkøbes.

Vægten har HOLD-funktion: Når en patient ikke står eller sidder fuldstændig stille vil en stabil vægt blive udregnet ved hjælp af en gennemsnitsvægt og denne bliver herefter frosset. Dette betyder, at der er tid til at fokusere på patienten og dernæst aflæse vægten i god ro og orden.

Vægten er forsynet med en BMI funktion, så undervægt, normalvægt eller overvægt kan fastslåes. Ergonomisk display med store taster og et LCD display med høj kontrast letter indtastning (f.eks. patientens højde til udregning af BMI) og aflæsning af patientdata).

Printer og interface kabel RS-232 kan tilkøbes.

Praktisk batteridrift kan tilkøbes (6x1,5 V AA standardbatterier ikke inkluderet - brugstid ca. op til 20 timer) - sikrer en høj grad af fleksibilitet og frihed fra hovedadaptere, stik opladere osv.

Tekniske data:

Stort LCD display med baggrundsllys, højde på bogstaver/tal er 25 mm.

Dimensioner på display: 20 x 13 x 6 cm (B/D/H)

Længde på ledning til display: ca. 180 cm

Dimensioner på vægt: 118 x 100 x 11,3 cm (B/D/H) (uden støttegelænder)

Dimensioner på vejeområde: 88 x 84 x 4 cm (B/D/H)

Nettovægt: ca. 76 kg

Nøjagtighed: 100 gram

Maks. belastning: 300 kg

Produktet lagerføres ikke - hjemtages kun på bestilling.

Kørestols-/platformsvægt - m/støttegelænder - Kern

Muligheder for tilbehør:

Ekstra støttegelænder (ikke foldbar).

Kan monteres efterfølgende.

Mål: 56 x 4 x 92 cm (B/D/H)

Gelændersæt med klapsæde (kan kun monteres hos producent - skal bestilles sammen med vægt).

Med to praktiske gelændere og integreret, sammenfoldeligt patientsæde, kan du konvertere KERN MWA 300K-1M til en multifunktionel vægt hurtigt og nemt.

På denne måde kan patienter vejes med støtte fra gelænderet eller i en komfortabel siddende position. Sædet kan klappes op, så en kørestol kan køres op vægten.

Den ekstra sikkerhedsstang, der følger med, sikrer en høj grad af stabilitet og sikkerhed.

"Drive-through" beskyttelse, er monteret som standard for de forreste hjul på kørestolen, hvilket giver en ekstra grad af sikkerhed.

Sædemål: 47 x 31 x 46 cm (B/D/H)



| Varenummer | Beskrivelse | Belastning | HMI-nr. |
|---------------|--|------------|---------|
| 44MWA300K-1PM | Kørestols-/platformsvægt, Kern, m/ver. | 300 kg | 124401 |
| 44MBC-A08 | Genopladelig batteripakke | | |
| 44MWA-A02 | Støttegelænder (ekstra) | | |
| 44MWA-A04 | Gelændersæt med klapsæde | | |

Transportabel kørestols-/platformsvægt - M-653



Med denne transportable kørestolsvægt/platformsvægt kan patienten forblive i sin egen kørestol.

Denne metode at veje på, sparer tid, da patienten ikke skal overføres til f.eks. en stolevægt.

Denne kørestols-/platformsvægt er ideel, hvis I skal veje patienter, der sidder i kørestol, men I skal kunne flytte vægten let og sikkert rundt mellem rum eller afdelinger.

M-620 er stor nok til at rumme næsten alle kørestole, både manuelle og elektrektriske.

For nem transport kan vægten hurtigt og let foldes sammen til en letkørlig vogn.

Udstyret med en TARE/Preset TARE funktion, så kørestolens vægt kan fratrækkes inden vejning.

Vægten har HOLD-funktion: Når en patient ikke står eller sidder fuldstændig stille, vil en stabil vægt blive udregnet ved hjælp af en gennemsnitsvægt og denne bliver herefter frosset.

Dette betyder, at der er tid til at fokusere på patienten og dernæst aflæse vægten i god ro og orden.



Er derudover forsynet med en BMI funktion, så undervægt, normalvægt eller overvægt kan fastslåes.

Den kan belastes helt op til 300 kg i intervaller på 100 g og har et genopladeligt batteri, der giver 55 timers kontinuerligt brug fra fuld opladning.

Den har Auto power-off funktion, som hjælper med til at spare på batteriet, samt let læseligt display.

Den er Klasse III godkendt.

Det er muligt at tilvælge Bluetooth- eller Wi-Fi-forbindelse, så der kan sendes patientdata til en central database - oplys herom v/bestilling.

Tekniske specifikationer:

Mål: 74 x 70 x 116 cm (L/B/H)

Mål på platform: 80 x 66 cm (L/B)

Mål på rampe: 79 x 44 cm (L/B)

Nettovægt: ca. 38 kg

Nøjagtighed: 100 gram

Maks. belastning: 300 kg

| Varenummer | Beskrivelse | Belastning | HMI-nr. |
|------------|--|------------|---------|
| 43M620 | Kørestols-/platformsvægt, Transportabel, M-620 | 300 kg | 131139 |
| 43M-BT | Bluetooth funktion | | |
| 43M-WIFI | Wi-Fi funktion | | |

Transportabel kørestolsvægt - M-615



Denne letvægts kørestolsvægt består af to letvægtsbjælker og en indikator til at aflæse vægten, hver bjælke er forbundet med en række hængsler og har et indbygget håndtag.

Vægten er designet til at være yderst bærbar og nem at transportere.

Den er utrolig let at bruge - du skal blot åbne bjælkerne, lægge dem fladt, tilslutte indikatoren, og du er klar til at veje din patient.

Velegnet til de fleste kørestole.

Udstyret med en TARE/Preset TARE funktion, så kørestolens vægt kan fratrækkes inden vejning.

Vægten har HOLD-funktion: Når en patient ikke står eller sidder fuldstændig stille, vil en stabil vægt blive udregnet ved hjælp af en gennemsnitsvægt og denne bliver herefter frosset.

Dette betyder, at der er tid til at fokusere på patienten og dernæst aflæse vægten i god ro og orden.

Er derudover forsynet med en BMI funktion, så undervægt, normalvægt eller overvægt kan fastslåes.

Den kan belastes helt op til 300 kg i intervaller på 100 g og har et genopladeligt batteri, der giver 55 timers kontinuerligt brug fra fuld opladning.

Den har Auto power-off funktion, som hjælper med til at spare på batteriet, samt let læseligt display.

Den er Klasse III godkendt.

Det er muligt at tilvælge Bluetooth- eller Wi-Fi-forbindelse, så der kan sendes patientdata til en central database - oplys herom v/bestilling.

Tekniske specifikationer:

Mål, foldet: 100 x 39,4 x 12,2 cm (L/B/H)

Mål, udfoldet: 100 x 87,7 x 6,4 cm (L/B/H)

Mål på vejeområde: 74 x 20 cm (L/B)

Afstand mellem bælker: 27 cm

Nøjagtighed: 100 gram

Nettovægt: 9,8 kg

Maks. belastning: 300 kg

| Varenummer | Beskrivelse | Belastning | HMI-nr. |
|------------|--|------------|---------|
| 43M615 | Kørestolsvægt, foldefunktion, Transportabel, M-615 | 300 kg | 131137 |
| 43CC615 | Bæretaske | | |
| 43M-BT | Bluetooth funktion | | |
| 43M-WIFI | Wi-Fi funktion | | |



Forflytningsvægten er en revolutionerende måde at veje tidskritiske eller immobile patienter på få sekunder.

Forflytningsvægten er et glidebræt/spine board med indbygget vægt, hvilket betyder, at patienter kan vejes under vandret-/sidevejs forflytning fra f.eks. bære til seng eller seng til seng.

Forflytningsvægten er hurtig og nem at bruge, Klasse III godkendt, MDD godkendt, og giver en mere værdig måde at veje på, hvilket er med til at reducere stress for patienterne.

Kroge til vægmontering for let opbevaring medleveres.

Hvad er fordelene ved forflytningsvægten?

For at administrere visse lægemidler eller behandlinger nøjagtigt, skal en patient vejes, men med immobile patienter er det ikke let. Tidligere var de eneste løsninger sengevægte eller hejsevægte, som begge kan være besværlige og tidskrævende, men forflytningsvægten gør det lettere at veje en patient på det tidspunkt, hvor han/hun bliver indlagt.

Vandret-/sidevejs forflytning af en patient fra f.eks. bære til seng eller seng til seng er en allerede eksisterende - og væsentlig - procedure. Derfor giver forflytningsvægten mulighed for at foretage en hurtig og nøjagtig vægtaflæsning for disse patienter.

Dette hjælper med at reducere tidsforbruget, og medicin eller behandling kan administreres hurtigere og mere korrekt af personalet. Det betyder også mindre stress for personalet, mindre stress for patienten, og at patienten kan vejes med værdighed.

Hvorfor har du brug for en nøjagtig vægt for patienterne?

En patients vægt kan være kritisk for at levere den rigtige pleje og behandling på det rigtige tidspunkt. At få en korrekt vægtaflæsning er især vigtig, når medicin eller behandling skal administreres hurtigt.

Jo mere nøjagtig vejningen er, jo mere nøjagtig kan doseringen blive og jo mere effektivt kan patienten behandles. Forflytningsvægten betyder, at vejninger aldrig behøver at blive estimeret igen - så I kan få bedre patientpleje og bedre patientresultater.

At få en nøjagtig vægt for en patient er også påkrævet for at identificere voksne, der er underernærede eller i fare for underernæring.



Hvordan bruges forflytningsvægten?

Forflytningsvægten kan bruges på samme måde som et glidebræt/spine board. I skal blot placere den på tværs af f.eks. båren og sengen og flytte patienten på tværs i tråd med jeres politikker for manuel håndtering/patientforflytning. I skal blot stoppe i 3-4 sekunder, når de passerer over vægten, for at vejningen kan registreres.

Hold-funktionen kan bruges, hvis det er nødvendigt, for at stabilisere vægtaflæsning på displayet.

Tekniske data:

Dimensioner: 180 cm x 70 cm x 3 cm

Funktioner: HOLD, TARE

Batterier: Internt genopladeligt batteri

Batteritid: 50 timers kontinuerligt brug

Graduering: 500 g

Egenvægt: 11 kg

Maks. belastning: 250 kg

Tilbehør:

Praktisk bæretaske med lynlås og polstring til M-999 Forflytningsvægt.

Letter transport af forflytningsvægten over længere afstande og giver beskyttelse under opbevaring.

Har skulderstropper og håndtag i hver ende.

| Varenummer | Beskrivelse | Belastning | HMI-nr. |
|------------|-------------------------------|------------|---------|
| 43M999 | Forflytningsvægt (PTS), M-999 | 250 kg | 130646 |
| 43C999 | Polstret bæretaske | | |



Populær babyvægt, fordi den har en stor vejeplade, som er ergonomisk afrundet, og derfor ideelt egnet til vejning af nyfødte.

Udstyret med specialfunktion (ideel til neonatal-afd.), som gør, at den kan beregne vægtøgning før/efter amning.

Fremstillet i robust ABS plastik, for let og hygiejnisk rengøring.

Med non-slip belægning på fødderne, for at undgå at vægten skrider ved vejning.

Vægten har en HOLD-funktion: Når barnet ikke ligger fuldstændig stille vil en stabil vægt blive udregnet ved hjælp af en gennemsnitsvægt og denne bliver herefter frosset. Dette betyder, at der er tid til at fokusere på barnet og dernæst aflæse vægten i god ro og orden.

Praktisk batteridrift (6x1,5 V AA standardbatterier inkluderet - brugstid ca. op til 20 timer) - sikrer en høj grad af fleksibilitet og frihed fra hovedadaptere, stik opladere osv.

Genopladelig batterioption og stik-option kan tilkøbes.

Tekniske data:

Stort LCD display med baggrundsbelysning, højde på bogstaver/tal er 25 mm

Dimensioner på display: 20 x 13 x 6 cm (B/D/H)

Dimensioner på vægt: 60 x 41 x 12 cm (L/D/H)

Dimensioner på vægt - inkl. højdemål: 89 x 47 x 17,5 cm (L/D/H)

Dimensioner på vægtområde: 60 x 28 x 5,5 cm (L/D/H)

Nettovægt: ca. 5,5 kg

Nøjagtighed: 0,01 kg

Belastning: 20 kg

Godkendt som medicinsk udstyr i henhold til 93/42 / EØF. - (inkl. Verification class III)

Tilbehør:

Fod-/hovedstøtte til fastgørelse på vejepladen for endnu mere sikkerhed ved vejning af små børn 2 stk. pr. sæt.

Højde-/længdemål, som måler op til 80 cm (intervaller på 1 mm).

Bæretaske (har vægten påsat højdemål, kan dette ikke være heri).

| Varenummer | Beskrivelse | Belastning | Egenvægt |
|--------------|----------------------------|------------|----------|
| 44MBC20K10EM | Babyvægt, Kern, m/verific. | 20 kg | 5,5 kg |
| 44MBC-A02 | Bæretaske | | |
| 44MBC-A01 | Højdemål - op til 80 cm | | |
| 44MBC-A05 | Fod-/hovedstøtte, 2 stk. | | |

Til vægmontering.

Produceret i robust aluminium.

Tekniske data:

Mål: 5,3 x 4 x 100 cm (B/D/H)

Måleområde: 60–205 cm, trin på 1 mm

Vægt: ca. 800 gram

Godkendt til medicinsk brug iht. 93/42/EEC



| Varenummer | Beskrivelse | Højde | Trin |
|------------|--------------------------|--------------------------|------|
| 44MSF200 | Højdemål, væghængt, Kern | 60 - 205 cm (måleområde) | 1 mm |

Scan-Med a|s

Denmark

Scan-Med A/S • Dalgårdsvej 17 • 8220 Brabrand
Tlf. 86 10 61 66 • Fax. 86 16 93 55